


# ISO 6888 等 各種ガイドライン準拠 黄色ブドウ球菌検査用製品

ISO 11133 に準じた培地の製造、品質管理を実施

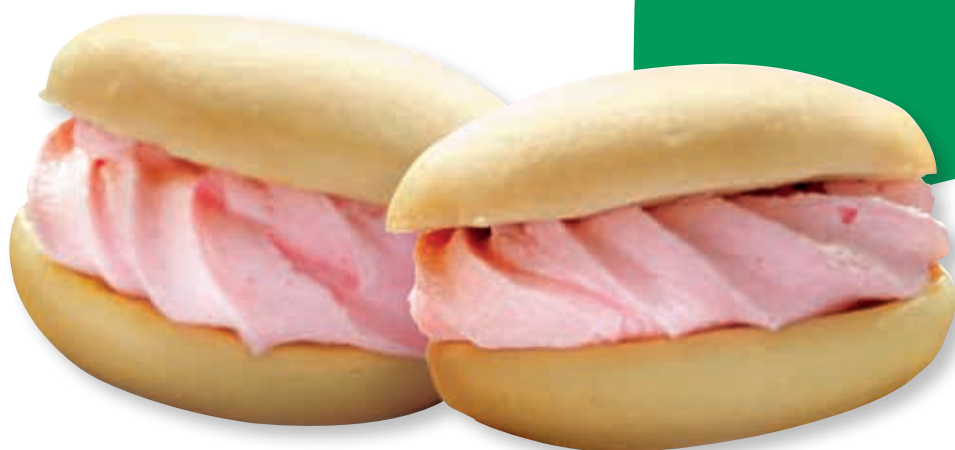

黄色ブドウ球菌は、通性嫌気性のグラム陽性球菌であり、非運動性で、カタラーゼおよびコアグラーゼ陽性です。一部の黄色ブドウ球菌は、ブドウ球菌エンテロトキシン（SE）を産生するため、ブドウ球菌性食中毒の原因菌となっています。黄色ブドウ球菌は、多様な範囲の温度（7～48.5℃、至適温度は30～37℃）、pH（4.2～9.3、至適 pH は7～7.5）、および食塩濃度（最大 15% NaCl）で増殖可能です。これらの特徴により、黄色ブドウ球菌は多様な食品内で増殖することが可能であり、食品衛生上重要な菌です。

メルクの培地製品は、高品質の原材料選定により微生物の高い回収率と発育性能を実現し、検査精度の向上に貢献します。

# 黄色ブドウ球菌検査用製品

| 用途       | 培地名                               | 弊社製品該当品               |             |              |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
|          |                                   | 製品名                   | 包装単位        | カタログ番号       |
| 増菌培養     | Giolitti-Cantoni ブイヨン             | Giolitti-Cantoni ブイヨン | 500 g       | 1.10675.0500 |
|          |                                   | テルル酸カリウム三水和物          | 100 g       | 1.05164.0100 |
|          |                                   | パラフィン、粘稠性             | 1 L         | 1.07160.1000 |
|          | TSB + 10% NaCl + 1%<br>ピルビン酸ナトリウム | ソイビーンカゼインダイジェスト培地     | 500 g       | 1.05459.0500 |
|          |                                   | 塩化ナトリウム               | 1 kg        | 1.06400.1000 |
|          |                                   | ピルビン酸ナトリウム            | 50 g        | 1.06619.0050 |
| サンプル希釈   |                                   | 緩衝ペプトン水               | 500 g       | 1.07228.0500 |
|          |                                   | ペプトン加 生理食塩水           | 500 g       | 1.12535.0500 |
| 単離・確認    | ベアード・パーカー寒天                       | ベアード・パーカー寒天基礎培地       | 500 g       | 1.05406.0500 |
|          |                                   | テルル酸卵黄エマルジョン          | 50 mL       | 1.03785.0050 |
|          |                                   | ベアードパーカーアガー LI        | 20 枚        | 1.46011.0020 |
|          | 卵黄加マンニット食塩寒天培地                    | マンニット食塩寒天培地           | 500 g       | 1.05404.0500 |
|          |                                   | 卵黄エマルジョン              | 10 × 100 mL | 1.03784.0001 |
| コアグラゼテスト |                                   | ブレインハートインヒュージョンブイヨン   | 500 g       | 1.10493.0500 |
|          |                                   | Bactident コアグラゼ       | 6 バイアル      | 1.13306.0001 |

## ベアード・パーカー寒天培地 (生培地)

- ・ ISO 6888、EP, USP, JP 準拠組成
- ・ ISO 11133 に準じた品質管理
- ・ 常温保管での長い有効期限

有効期限：製造より 6 ヶ月

保管条件：15 – 25℃保管


製品名：ベアード・パーカーアガー LI

カタログ番号：1.46011.0020

包装単位：20 枚入り

### 組成

|          |        |                 |      |
|----------|--------|-----------------|------|
| カゼインペプトン | 10 g   | リチウムクロライド       | 5 g  |
| 肉エキス     | 5 g    | ピルビン酸ナトリウム      | 10 g |
| 酵母エキス    | 1 g    | グリシン            | 12 g |
| テルル酸カリウム | 100 mg | 寒天              | 22 g |
| 卵黄エマルジョン | 50 mL  | 最終 pH 6.8 ± 0.2 |      |

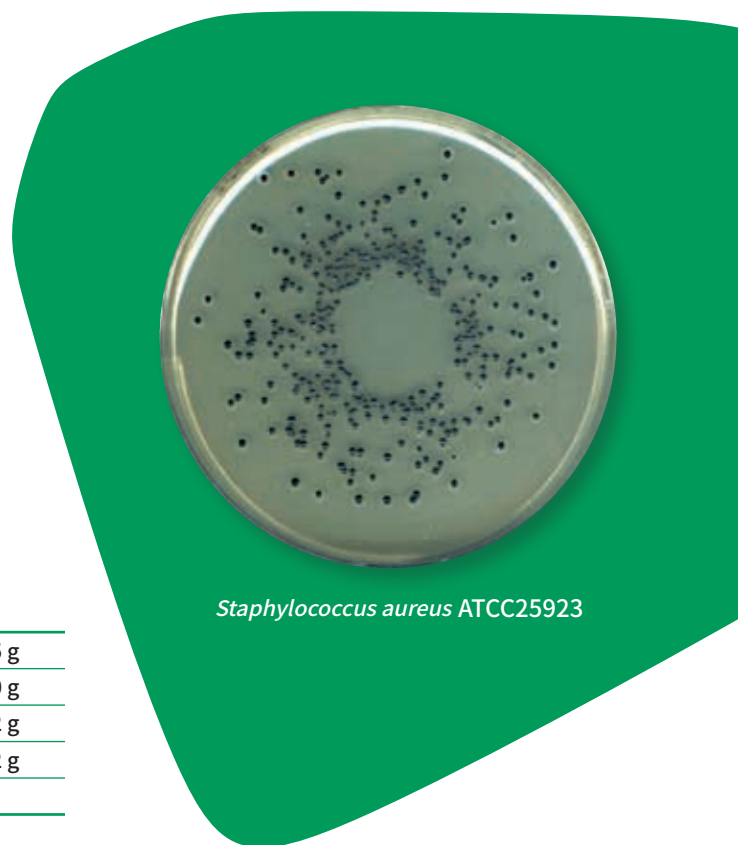

*Staphylococcus aureus* ATCC25923

微生物検査関連製品の詳細ははこちらから [www.merckmillipore.jp/bm](http://www.merckmillipore.jp/bm)

本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaA の登録商標もしくは商標です。

## メルク株式会社

ライフサイエンス バイオモニタリング事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら [www.merckmillipore.jp](http://www.merckmillipore.jp)

お問合せ ▶ On-Line: [www.merckmillipore.jp/jpts](http://www.merckmillipore.jp/jpts) Tel: 0120-013-326 Fax: 03-5434-4897

[BMM044]1605-0.1K/M